

Accessories

アクセサリー

各種ハンドピースやチップの使いやすさも追求

2つのラインナップ(オリジナルチップ、Pチップ)に対応したハンドピースシステムを採用。照射部位に応じた視認性にこだわり、ミニチュアヘッドを採用しました。オリジナルチップもしくはPチップからお選びください




オリジナルチップセット

トップピース



チップの脱着はフリクション式を採用しており、十分な保持力を持ちながら、ワンタッチでの交換が可能です。

オリジナルチップ

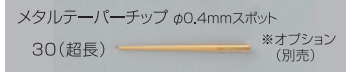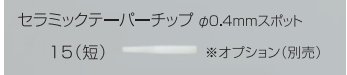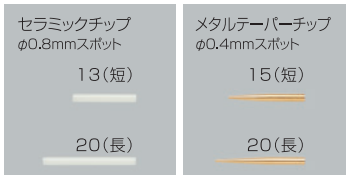

細いテーパ形状および円筒状のチップ。ワンタッチでチップの脱着が可能。

ベルレーザーエス用ファイバー



延長ファイバー



ファイバーとハンドピースの接続部から先端部までCO₂レーザー光を導光します。


Pチップセット

トップピースP




チップの脱着はネジ式になっています。

Pチップ

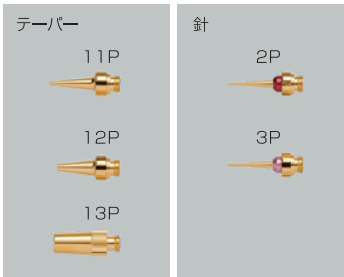

テーパ形状および針状のチップ。

ベルレーザーエス用ファイバーP

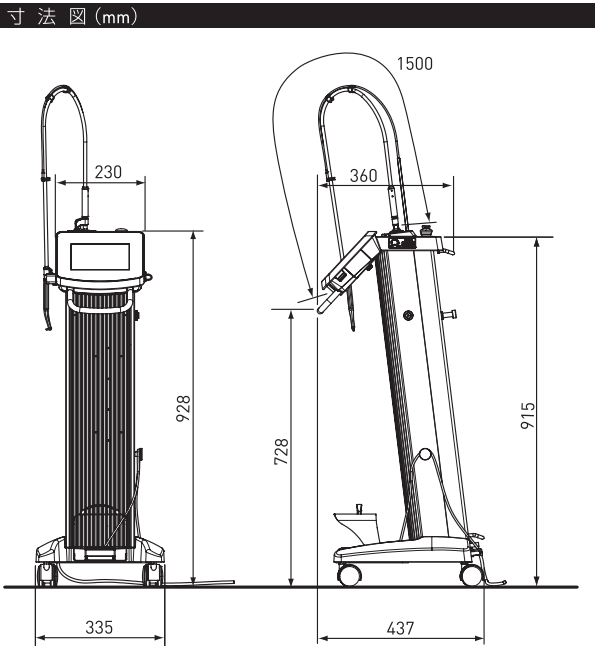

仕 様		
一 般 的 名 称	炭酸ガスレーザ	
販 売 名	ベルレーザー	
医療機器承認番号	21700BZZ00348000	
ク ラ ス 分 類 等	クラスⅢ 高度管理医療機器 特定保守管理医療機器 設置管理医療機器	
効 能 ・ 効 果	生体組織の切開、止血、凝固および蒸散	
電 気 定 格	AC100V 50Hz/60Hz 400VA	
電撃に対する保護	クラスⅠ機器 装着部なし	
外 形 寸 法	W335×D437×H928mm ※ファイバー部除く	
質 量	28kg	
導 光 路	中空ファイバー	
レーザー照射出力 可 変 範 囲	0.5W～15W ※0.5W～2.0Wは0.1W刻み、 2.0W～10Wは0.5W刻み 10W～15Wは1W刻みで設定可能	
照 射 設 定	WAVE	連続/シングルパルスモード
	PULSE	ノーマルパルス/スーパーパルス/ベルモントパルス
冷 却 方 式	自然空冷	
レーザー出射口 から出るガスの 種 類 と 流 量	種類：空気	流量：1.8L/min±20%(最大)

ベルレーザーエス本体

本体(1台)、電源コード(1本)、フットスイッチ(1個)、ファイバー保持ロッド(1本)、保護メガネ(3個)、キー(1個)、六角棒レンチ(1本)、SDカード(2GB)、添付文書(1部)

ベルレーザーエスオリジナルセット

ベルレーザーエス用ファイバー(1本)、延長ファイバー付(1本)、コントラハンドピース(1本)、メタルテーパチップ15(短)・20(長)(各2本)、セラミックチップ13(短)・20(長)(各2本)


ベルレーザーエスPセット

ベルレーザーエス用ファイバーP(1本)、コントラトップピース(Pチップ用)(1本)、針チップ2P・3P(各2本)、テーパチップ11P・12P(各2本)、テーパチップ13P(1本)、キャリブレーション用ガイド(1本)

安全にお使いいただくために

- ◎ご購入前に、設置場所・使用条件・用途をご確認ください。
- ◎ご使用前に添付文書、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

◎製品の寸法、質量、動作範囲の表示には、若干の誤差を含んでいます。
◎このカタログは2022年6月現在のものです。



YY-DM-240 2206015C MI



CO₂ レーザー

Bel Laser S

ベルレーザー エス

シンプルなオペレーションで
診療に活きるスタンダードモデル



※写真はチップを取り外した状態です。

タカラベルモント株式会社 <https://www.takara-dental.jp>

【大阪本社】〒542-0083 大阪市中央区東心斎橋2-1-1
【東京本社】〒107-0052 東京都港区赤坂7-1-19

札幌 (011)863-2007	盛岡 (019)652-9744	仙台 (022)232-4480	郡山 (024)925-0742
新潟 (025)268-0333	さいたま (048)640-5900	千葉 (043)302-0267	東京 (03)3405-6877
横浜 (045)681-6241	名古屋 (052)932-6251	金沢 (076)221-8412	京都 (075)241-3425
大阪 (06)6212-3602	神戸 (078)231-6751	岡山 (086)233-8825	広島 (082)278-2411
高松 (087)862-3480	福岡 (092)411-2746	鹿児島 (099)226-9481	沖縄 (098)897-6656

コールセンター
修理および点検受付窓口
TEL(0120)194-222

※コールセンターはタカラベルモント株式会社が修理および点検を委託するベルモントコミュニケーションズ株式会社の受付窓口です。



製造販売元
タカラメディカル株式会社 兵庫県尼崎市額田町5-15

●印刷物のため、色は実物と多少異なることがあります。 ●寸法・仕様は予告なく変更することがあります。


Simple mode 〈シンプルモード〉 2つのシンプルモードを搭載。 Simple mode P 〈シンプルモードP〉

2ステップで簡単に操作できるシンプルモード。

アイコン形式のスイッチを採用し、更に使いやすく進化。

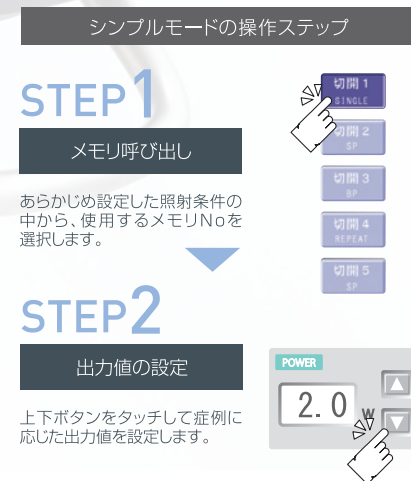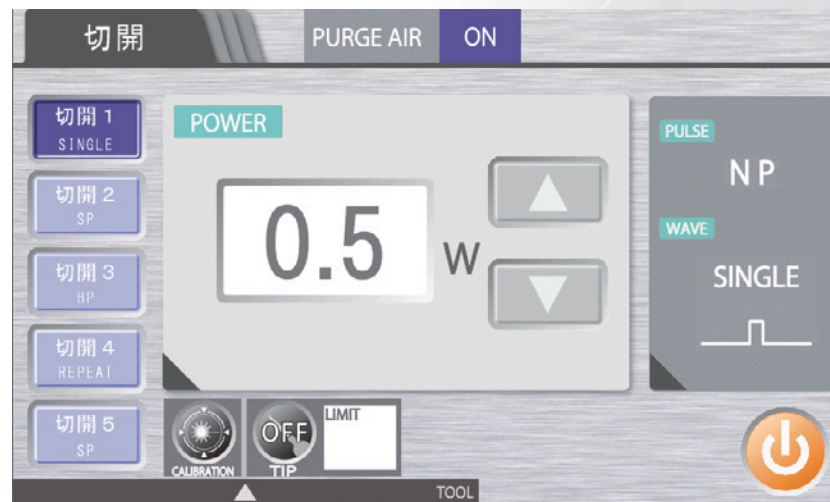

■ ツールバーから使いたい機能をすぐに選択できる

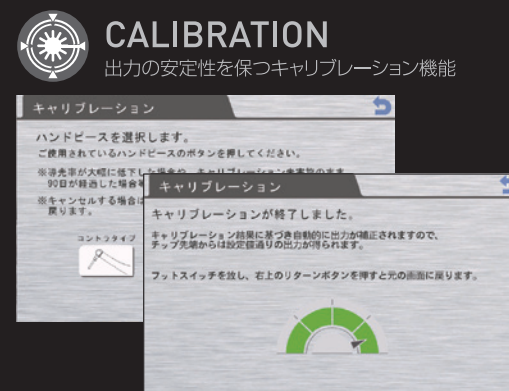


FINE フットスイッチの踏み加減で出力調節が可能
SLOW フットスイッチを踏むと1秒後に設定出力に到達
ON/OFF フットスイッチを踏むと直ちに設定出力を照射

※上記画像イメージは機能を分かりやすく説明するために加工しており、実際の表示とは異なります。




フルモード画面では詳細な照射条件の設定などが可能です。
 フルモード画面で設定可能な照射条件
 ■ PULSE ■ WAVE ■ REPEATのON TIMEとOFF TIME、SINGLEのON TIME ■ POWER

■ フレキシブルにとりまわせるファイバー

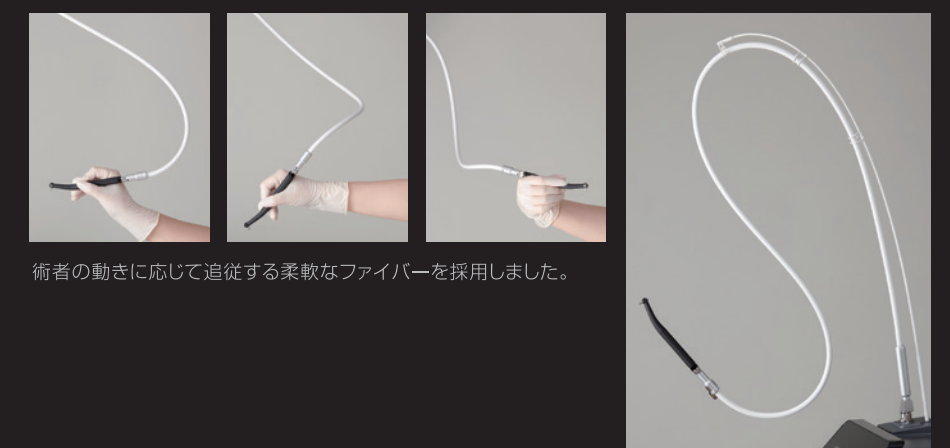

出力と被照射体の温度変化について ■ 温度 ■ パワー ※グラフはイメージ図です。

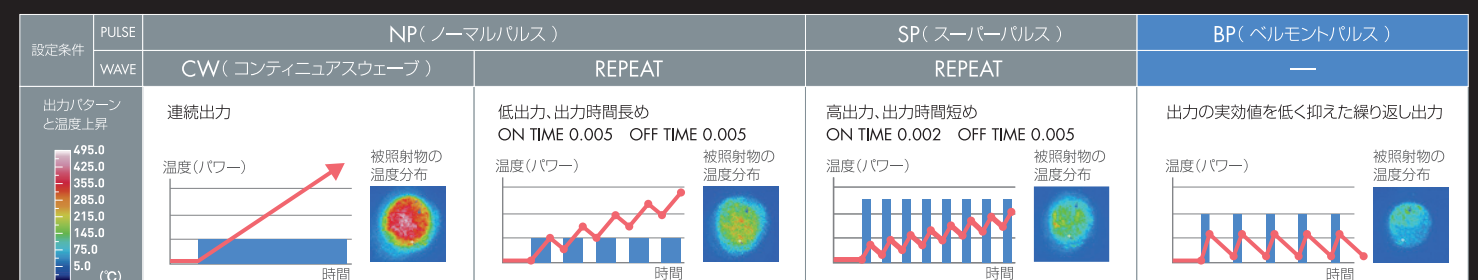

■ 条件:被照射体 牛レバー ■ 距離:1cmの距離で垂直に照射 ■ チップ:セラミックチップ13mm ■ 照射時間:3秒間 ■ 温度測定器:NEC三栄社製 TH9100WV
 【資料元:大阪歯科大学歯科保存学講座 吉川 一志 准教授の資料を一部抜粋】

保険適用

■ 口腔粘膜処置* (I 029-3) 30点
 ■ レーザー機器加算* (J 200-4-2) 50点、100点、200点

*算定するには、施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出る必要があります。また、レーザー機器加算については処置内容によって点数が異なります。