

Accessories

アクセサリー

各種ハンドピースやチップの使いやすさも追求

2つのラインナップ(オリジナルチップ、Pチップ)に対応したハンドピースシステムを採用。
照射部位に応じた視認性にこだわり、ミニチュアヘッドを採用しました。
オリジナルチップもしくはPチップからお選びください。

オリジナルチップ用

トップピース

コントラタイプ

ストレータイプ

※オプション(別売)

チップの脱着はフリクション式を採用しており、十分な保持力を持ちながら、ワンタッチでの交換が可能です。

Pチップ用

トップピースP

チップの脱着はネジ式になっています。

オリジナルチップ

セラミックチップ
φ0.8mmスポット

13(短)

20(長)

メタルテーパーチップ
φ0.4mmスポット

15(短)

20(長)

セラミックテーパーチップ φ0.4mmスポット

15(短)

※オプション(別売)

メタルテーパーチップ φ0.4mmスポット

30(超長)

※オプション(別売)

Pチップ

テーパー

11P

12P

13P

針

2P

3P

テーパー形状および針状のチップ。

ベルレーザープラス用ファイバー(ガイド光付)

オリジナルチップ/Pチップ共用

タカラベルモント株式会社

https://www.takara-dental.jp

【大阪本社】〒542-0083 大阪市中央区東心斎橋2-1-1

【東京本社】〒107-0052 東京都港区赤坂7-1-19

札幌 (011)863-2007

新潟 (025)268-0333

横浜 (045)681-6241

大阪 (06)6212-3602

高松 (087)862-3480

盛岡 (019)652-9744

さいたま (048)640-5900

名古屋 (052)932-6251

神戸 (078)231-6751

福岡 (092)411-2746

仙台 (022)232-4480

千葉 (043)302-0267

金沢 (076)221-8412

岡山 (086)233-8825

鹿児島 (099)226-9481

郡山 (024)925-0742

東京 (03)3405-6877

京都 (075)241-3425

広島 (082)278-2411

沖縄 (098)897-6656

コールセンター

TEL(0120)194-222

【フリーダイヤル】 FAX(072)344-7985

修理および点検受付窓口

製造販売元

タカラメディカル株式会社 兵庫県尼崎市額田町5-15

●印刷物のため、色は実物と多少異なることがあります。

●寸法・仕様は予告なく変更することがあります。

寸法図(mm)

仕 様	
一 般 的 名 称	炭酸ガスレーザー
販 売 名	ベルレーザー
医療機器承認番号	21700BZZ00348000
ク ラ ス 分 類 等	クラスⅢ 高度管理医療機器 特定保守管理医療機器 設置管理医療機器
効 能 ・ 効 果	生体組織の切開、止血、凝固および蒸散
電 気 定 格	AC100V 50Hz/60Hz 400VA
電撃に対する保護	クラスⅠ機器 装着部なし
外 形 寸 法	W335×D437×H928mm ※ファイバー部除く
質 量	28kg
導 光 路	中空ファイバー
レーザー照射出力 可 変 範 囲	0.5W～15W ※0.5W～2.0Wは0.1W刻み、 2.0W～10Wは0.5W刻み 10W～15Wは1W刻みで設定可能
照 射 設 定	WAVE 連続/シングル/リビート PULSE ノーマルパルス/スーパーパルス/ベルモントパルス
冷 却 方 式	自然空冷
ガ イ ド 光	5mW以下(チップ先端)
レーザー出射口 から出るガスの 種 類 と 流 量	種類：空気 流量：1.8L/min±20%(最大)

ベルレーザープラス本体

本体(1台)、電源コード(1本)、フットスイッチ(1個)、ファイバー保持ロッド(1本)、保護メガネ(3個)、キー(1個)、六角棒レンチ(1本)、SDカード(2GB)、添付文書(1部)

ベルレーザープラスオリジナルチップセット

ベルレーザープラス用ファイバー(1本)、コントラトップピース(1本)、メタルテーパーチップ15(短)・20(長)(各2本)、セラミックチップ13(短)・20(長)(各2本)

ベルレーザープラスPチップセット

ベルレーザープラス用ファイバーP(1本)、コントラトップピース(Pチップ用)(1本)、針チップ2P・3P(各2本)、テーパーチップ11P・12P(各2本)、テーパーチップ13P(1本)、キャリブレーション用ガイド(1本)

安全にお使いいただくために

ⓘ

●ご購入前に、設置場所・使用条件・用途をご確認ください。

●ご使用の前に添付文書、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

◎製品の寸法、質量、動作範囲の表示には、若干の誤差を含んでいます。

◎このカタログは2022年11月現在のものです。

TAKARA BELMONT

CO₂ レーザー

Bel Laser +

ベルレーザー プラス


タッチパネルでシンプル操作、
使いやすさを追求したガイド光モデル



2つのシンプルモードを搭載。

Simple mode 〈シンプルモード〉

2ステップで簡単に操作できるシンプルモード。

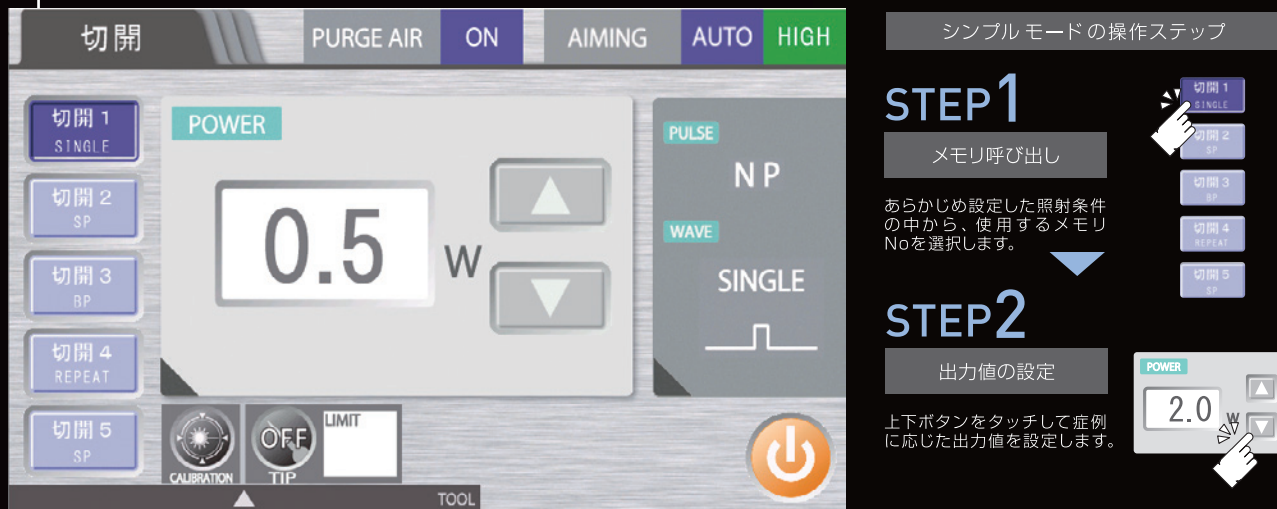

Simple mode P 〈シンプルモードP〉

アイコン形式のスイッチを採用し、更に使いやすく進化。



保険適用


- 口腔粘膜処置※(I 029-3) 30点
- レーザー機器加算※(J 200-4-2) 50点、100点、200点

※算定するには、施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出る必要があります。また、レーザー機器加算については処置内容によって点数が異なります。

Convenient Toolbar

ツールバーから使いたい機能をすぐに選択できる

※下記画像イメージは機能を分かりやすく説明するために加工しており、実際の表示とは異なります。

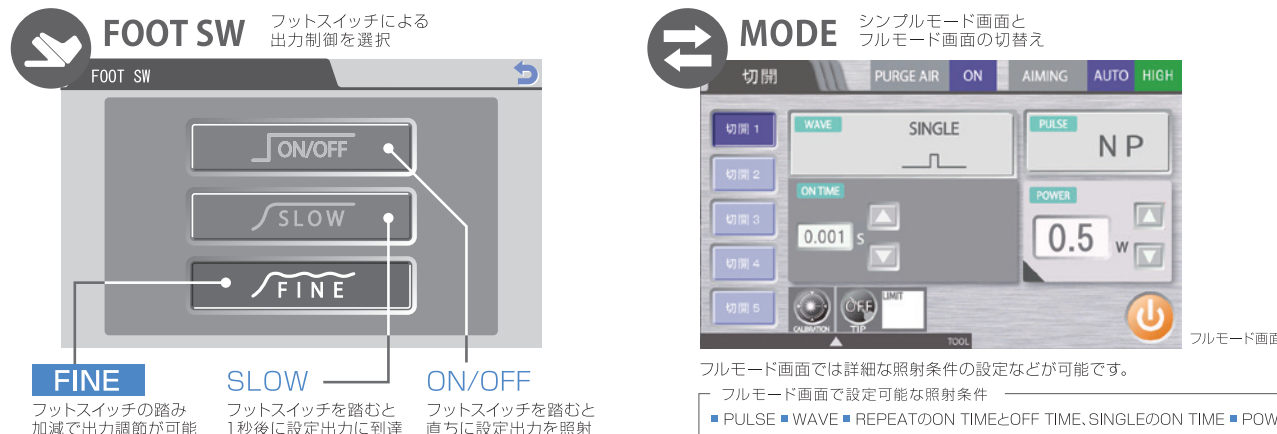


Sophisticated form

Flexible fiber フレキシブルにとりまわせるファイバー

術者の動きに応じて追従する柔軟なファイバーを採用しました。



出力と被照射体の温度変化について

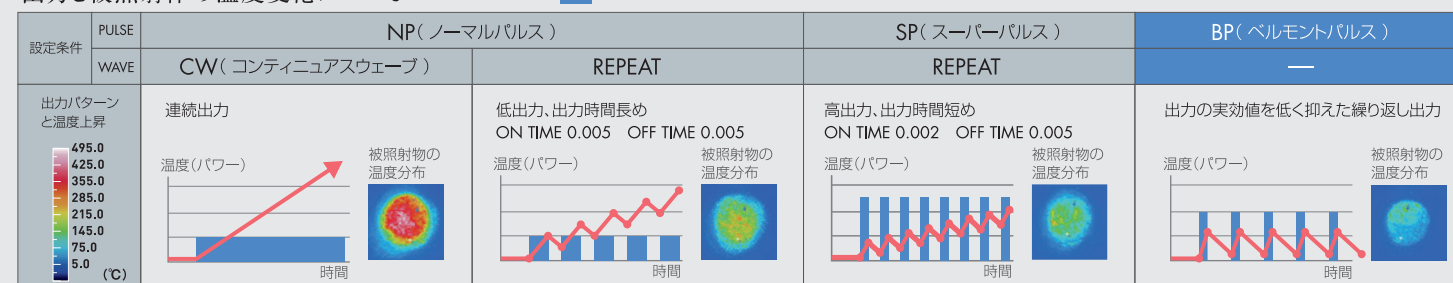

■ 条件:被照射体 牛レバー ■ 距離:1 cmの距離で垂直に照射 ■ チップ:セラミックチップ1.3mm ■ 照射時間:3秒間 ■ 温度測定器:NEC三栄社製 TH910QWV
【資料元:大阪歯科大学歯科保存学講座 吉川 一志 准教授の資料を一部抜粋】