

CHANGE

デンタルユニットに見えない

COMMUNICATION,

新たなコミュニケーションが

CHANGE

患者さんとの距離を変え

MOTIVATION.

患者さんの健康意識を変えていく。



precia

プレシア

【コミュニケーション デンタルユニット】

タカラベルモント株式会社

<https://www.takara-dental.jp>

【大阪本社】〒542-0083 大阪市中央区東心斎橋2-1-1 【東京本社】〒107-0052 東京都港区赤坂7-1-19

札幌 (011)863-2007 盛岡 (019)652-9744 仙台 (022)232-4480 郡山 (024)925-0742 新潟 (025)268-0333 さいたま (048)640-5900 千葉 (043)302-0267
東京 (03)3405-6877 横浜 (045)681-6241 名古屋 (052)932-6251 金沢 (076)221-8412 京都 (075)241-3425 大阪 (06)6212-3602 神戸 (078)231-6751
岡山 (086)233-8825 広島 (082)278-2411 高松 (087)862-3480 福岡 (092)411-2746 鹿児島 (099)226-9481 沖縄 (098)897-6656

安全にお使いいただくために
●ご購入の前に、設置条件・使用条件・用途をご確認ください。
●ご使用前に添付文書、取扱説明書をよく読みの上、正しくお使いください。

●製品の仕様・デザインは、予告なく変更される場合がありますのでご了承ください。
●写真はカラー印刷のため実物の色とは多少異なる場合があります。
●実際の製品にはご使用上の注意事項が貼付されています。
●製品の寸法、質量、動作範囲の表示には、若干の誤差を含まれています。

修理および点検受付窓口

株式会社ナカニシ 〒322-8464 栃木県鹿沼市下日町700
白水製機株式会社 〒532-0033 大阪府大阪市淀川区新高1-1-15
ビエン・エア・アジア株式会社 〒171-0014 東京都豊島区池袋2-40-12 西池袋第一生命ビルディング

ベルモントコミュニケーションズ㈱ コールセンター
TEL (0120)194-222 (フリーダイヤル)
FAX (072)344-7185

YY-DM-196 230601K YA

TAKARA BELMONT

こころを動かすデザイン。 こころが近づくコミュニケーション。

「デンタルユニット」に見えない、新しいデザイン性へ。

ドクターユニットとカスピダーユニットを一体感のあるキャビネットデザインに仕上げた、スマートでコンパクトなフォルム。



・ブラックカバー仕様^{※1}、ホワイトレザー（ES1）張り^{※1 ※2}
フロストガラス風カスピダーパネル^{※3}

※1 受注生産

※2 ホワイトレザー（ES1）は、使用状況により、衣類の色移り、
汚れが付着しやすい素材です。あらかじめ、ご注意ください。

※3 オプション

これは、患者さんと歯科医院がお互いを理解しながら、
口もとの美と健康を目指していくために考えられたユニットのカタチです。

タカラベルモントが追求してきた“患者さんの視点”を重視し、コミュニケーションのとりやすさ、
快適性を追求、ニーズにお応えする治療のあり方を“見えない”をキーワードに再構成しました。

“見えない”ことで患者さんのこころに変化があらわれます。




小さなボディに、たくさんの変化が詰まっている。

precia
プレシア

PRECIAとは：Precision（正確な）、Perceive（認知）、Affirmation（自覚と目標設定）を組み合わせた造語。
正しい理解を通して、自ら意欲的に健康増進に取り組む患者さんを育みたいという思いが込められています。

スムーズな診療の流れをつくる 「動線分離」設計

患者エリアとスタッフエリアを明確に区分する「動線分離」のレイアウトにより、患者さんとスタッフの不要な交錯を回避できる診療空間をつくります。

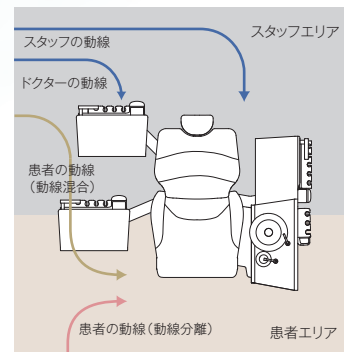

【導入ポジション】

※ オプション装備例


DESIGNED FOR COMMUNICATION

健康意識を高めるコミュニケーションのためのデザイン。



【診査・診断ポジション】

6時の対面ポジションにスムーズに移行できます。また、9時側のスペースが広く使えるので、診査機器などの配置が容易です。

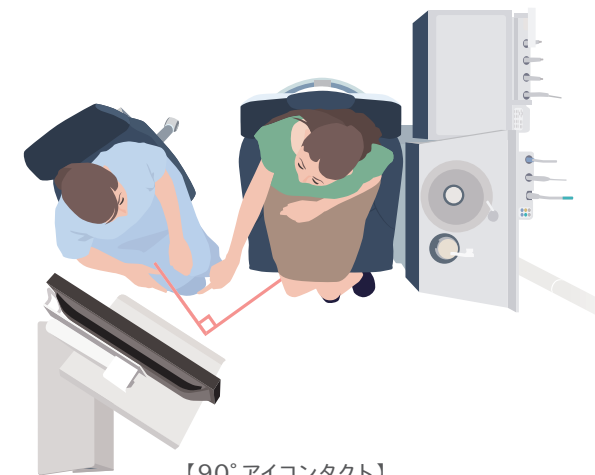

【90°アイコンタクト】

患者さんとのコミュニケーションがとりやすい90°のアイコンタクトポジション。自然な対話が可能になり緊張や不安を和らげます。

COMMUNICATION MODULE

患者さんとの対話を支えるコミュニケーションモジュール。

9時側スペースに患者さんとのコミュニケーションに必要なツールを配置できます。



※ PC本体とモニターは製品には含まれません。



【治療ポジション】

※写真はオプションを含みます。

DESIGNED FOR DENTAL CARE

治療ユニットとしてのポジション移動もスムーズに。ワンアクションデザイン。



スムーズに治療ポジションへ移行し、広範囲の治療域を確保。

ワンアクションのスムーズなデリバリーでドクターユニットが治療ポジションへ移行。円弧状になめらかに動くアークデリバリー機構の採用により、ドクターユニットが2時から9時位置まで広範囲に可動し、2・4ハンドの治療に対応できます。

DOCTOR UNIT

視認性と操作性を考慮したドクターユニット。



パネルスイッチ操作一覧

ハンドピースコントロール

- ハンドピースライトスイッチ
- スプレー切替えスイッチ
- マイクロモーター正逆切替スイッチ

チェアコントロール

- 椅子プリセットスイッチ
- 椅子オートリターンスイッチ
- 椅子ラストポジションスイッチ
- 椅子マニュアルスイッチ

コントロールパネル

直感操作を追求した機能的でわかりやすいインターフェース構成。インジケーター部の視認性にもこだわり、必要な情報を一目で認識できるよう配慮しています。またパネル下部に指を置けるスペースを持たせ、操作性に配慮しました。



【電気スケーラーモード】

スケーリング、エンド、ペリオのモード切替と、パワーの出力がバーグラフで確認できます。



【マイクロモーターモード】

マイクロモーターの回転数設定の確認に。またトルクコントロール、オートリバース、プリセットモードの設定も行えます。

※トルクコントロール、オートリバースの設定は、DA-NM701、MX2使用の場合に限ります。


ハンドピースデリバリー

ハンドピースを取り上げるドクターの手の動きに合わせたホルダーを採用し、患者さんの口腔までのスムーズなデリバリーを可能にします。

フットコントローラー

ハンドピースの調整を足もとで細やかに行えます。マイクロモーター等の強弱調整はスライドペダルで行います。



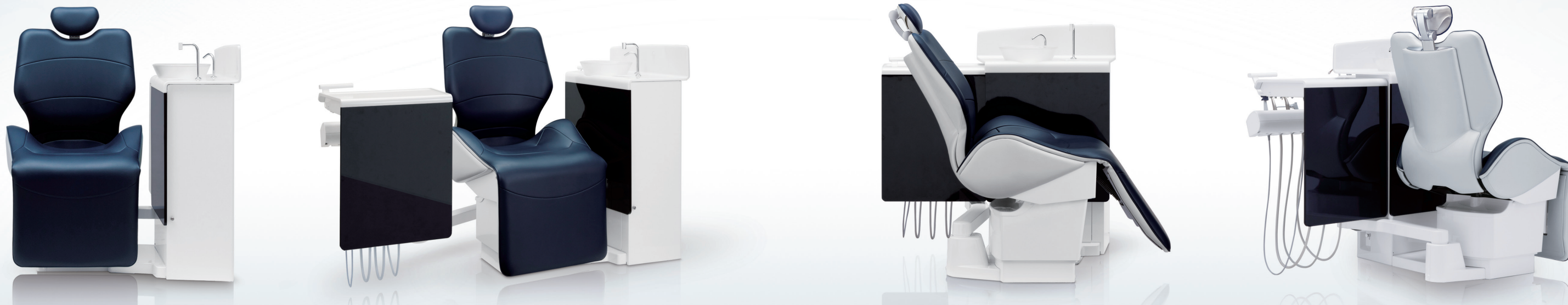

CUSPIDOR UNIT

患者さんの快適性に配慮したカスピダーユニット。



患者さんの手もとを明るく演出
LED照明（オプション）

スピットンボウルと、フロストガラス風のカスピダーパネルが柔らかな光で彩られ、患者さんの手もとを明るく演出します。



見やすさと操作性を追求 LEDデンタルライト ステラライトヴィータ

5,000～34,000Luxで無段階で調光でき、高い演色性により自然な色を再現。



一体成型がポイント
アシスタントホルダー

アシスタント・インストルメントの取り出し、収納ともに行いやすい形状を採用しています。



便利な
センサー式コップ給水

置かれた紙コップを検知する、センサー式の給水方式を採用。さらに給水と連動して、ボウル洗浄も行います。



清潔感と使いやすさを追求
着脱式スピットンボウル

血液などの付着が少ない、衛生的で明るいイメージのガラス素材を採用。ガラスボウルは着脱式により、取り外しての清掃が可能です。

パネルスイッチ

チェアコントロール

- メモリースイッチ（1・2）
- オートリターンスイッチ（0）
- ラストポジションスイッチ（LP）
- コップ給水スイッチ
- スピットン洗浄スイッチ
- デンタルライトスイッチ（エキストラ）



毎日のメンテナンスにも配慮
ソリッドコレクター

日々のメンテナンスが必要なソリッドコレクターを、カスピダーの前面に配置。キャップも大きめで容易にアクセスできます。

外部機器への水・エアー供給が可能
サービスカプラー（オプション）

サービスカプラーを前面に配置、外部機器への水・エアー供給が容易に行えます。

CHAIR

やさしく包み込むホールド感のチェア。



塩ビレザー使用のソフトな座り心地
バックレスト&シート

一体感のあるバックレスト&シートで患者さんを包み込むようなやさしい座り心地を追求。ゆったりとくつろぎを感じていただきながらのカウンセリングや診療が可能です。



パワーヘッドレスト
（オプション）

頭部を安定させた状態で角度を調整。患者さんの負担を軽減しながら、水平位におけるドクターの口腔内視野を確保します。



アームレスト

シートと一体化したアームレストの採用により圧迫感のないデザインへ。患者さんの手になじむ柔らかなデザインです。



バックレスト


患者さんが安心して身体をゆだねることができるワイドなバックレスト。ソファのようなリラクゼーションを実現。

OPTION

ドクターの治療ニーズと快適な環境を
サポートするための豊富なオプション機能。



**ワンタッチ
ガスバーナー**
ワンタッチで点火できる、
連続使用可能なガスバーナー。

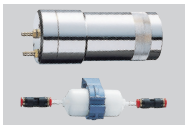

**水・エアークリーン
フィルター**
多孔質中空糸膜を使用した、歯科用
精密フィルター。ライン内の赤サビ、
スケールの付着防止や、バクテリア、
空気中の微粒子の除去に。



ティッシュボックス
うがいの後などに使用するティッ
シュをセットできます。厚さ6cmま
でのボックスティッシュに対応し
ています。



サポートアームレスト
より高い位置の手すりをお
選びいただけます。サポート
アームレストのカラーは、レ
ザーカラーにより異なります。



ジョイスティックスイッチ

チェアのコントロールを行う、フッ
トスイッチです。足もとで微細にコ
ントロールできるので、手をクリー
ンに保ちます。



タブレットホルダー
タブレットを使ったコミュニケー
ションに便利なホルダーです。
※タブレット本体は含まれません。



電気スケーラー(ライト付・ライト無)
ニュートロン
バリ奥斯2



LEDライト付マイクロモーター(ブラシレスタイプ)
MX2/DA-NM701/DA-NM501

COLOR VARIATION

インテリアになじむ上品な
ツートンレザー&キャビネットのカラーリング。



レザー ホワイト/レッド^{※1}
カスビダーパネル フロストガラス風^{※2}
ブラックカバー仕様^{※1}
※1 受注生産 納期等はお問い合わせください。
※2 オプション

レザーについてのご注意
レザーは使用状況により、衣類の
色移り、汚れが付着しやすい素材
です。あらかじめ、ご注意ください。
(特に、ホワイト、イエロー、アイボリー)
※掲載レザーカラー以外は特注費が発生します



レザー アルドブルー/パールシルバー
カスビダーパネル アルドブルー



レザー ダークブラウン/チタンシルバー
カスビダーパネル ダークブラウン



レザー イエロー/パールシルバー
カスビダーパネル アイボリー



レザー ブラック/パールシルバー



レザー アイボリー/パールシルバー

SPECIFICATIONS

◎ドクターユニット部	標準○/オプション△
パネルカラー (アルドブルー、ダークブラウン、アイボリー)	○
パネルカラー (フロストガラス風)	△
パネルカラー (ボタニカル・ジオウッド)	△
ホルダータイプ	○
ハンドピース3本掛け (シリンジ含む)	○
ハンドピース回路追加 (5本まで)	△
BT14シリンジ	△
77型シリンジ	○
ルザーニ6WAYシリンジ (ライト付)	△
ライト付マイクロモーター (DA-NM501)	○
ライト付マイクロモーター (DA-NM701、MX2)	△
エアモーター (DA-281)	△
ニュートロンスケーラー	△
ニュートロンスケーラー (スリムタイプ)	△
バリ奥斯2スケーラー	△
ライト付タービン1本仕様	○
ライト付タービン2本以上仕様	△
着脱式ハンドピースホース	○
ハンドピース温水	△
フラッシュアウト	△
スライド式フットコントローラー	△
スライド式フットコントローラー (水切替スイッチ付)	○
フットコントローラーファイン	△
フットコントローラーキャリア	△
チェア操作用フットスイッチ (2本まで)	△

アクセサリー	標準○/オプション△
汚物入れ用ホルダー	○
シリコンマット	○
ディスプレイマット	△
ワンタッチガスバーナー (ボンベケース付)	△
フラッシュアウトレー	△
タブレットホルダー	△

◎カスビダー部	標準○/オプション△
パネルカラー (アルドブルー、ダークブラウン、アイボリー)	○
パネルカラー (フロストガラス風、LED照明付)	△
パネルカラー (ボタニカル・ジオウッド)	△
スピットン	○
センサ式コップ給水 (重量感知式)	○
ボウル洗浄 (単独・連動タイマー式)	○
水クリンフィルター	△
エアークリーンフィルター	△
オートセパレーター (CS1)	△
水用サービスカブラー	△
エアー用サービスカブラー	△
アシスタント	○
セントラルバキューム (遅延付)	○
セントラル式排唾	△
BT14シリンジ	△
77型シリンジ	○
チェア操作 (P1・P2・LP・O)	○
温水器	○

チェア部	標準○/オプション△
レザーカラー (コンビレザー6色)	○
ファブリックシート (6色)	△
パワーヘッドレスト	△
2関節ヘッドレスト	○
アームレスト左	○
アームレスト右	○
サポートアームレスト左	△
サポートアームレスト右	△
ジョイスティックスイッチ (2本)	△
透明ビニールシート	△
ライト部	○
ストレートポール	○
ステラライトヴィータ	○
患者用ミラー	△
モニターブラケット	△
ティッシュボックス	△
コミュニケーション	△
モジュール	△
本体カラーリング	○
ブラックカバー仕様	※(要注対応)

◎プレシア	
定格電源	AC100V 50/60Hz
電源入力	ユニット部 6.3A/5.5A チェア部 3.8A/3.9A
質量 ユニット部	110kg
チェア部	110kg

販売名	一般的名称	認証・届出番号	クラス分類	特定保守	設置管理	製造販売元
プレシア	歯科用ユニット	224ACBZX00054000	管理	該当	該当	タカラベルモント株式会社
プレシア チェア	歯科診査・治療用チェア	27B1X00042001034	一般	該当	該当	タカラベルモント株式会社
ニュートロンモジュールキット	歯科用多目的超音波治療器	224ALBZX00038000	管理	該当	非該当	白水貿易株式会社
エレクトリック マイクロモータ	歯科用電気回転駆動装置	220AFBZX000212000	管理	該当	非該当	ビエン・エア・アジア株式会社
バリ奥斯 170	歯科用多目的超音波治療器	223ALBZX00036000	管理	該当	非該当	株式会社ナカニシ
ステラライトヴィータ	汎用歯科用照明器	27B1X00042002049	一般	非該当	非該当	タカラベルモント株式会社
エクスフォースDA-800	歯科用電気回転駆動装置	221ALBZX00019A01	管理	該当	非該当	株式会社ナカニシ

precia BOTANICAL



precia GEO WOOD



f-style

無機質になりがちな診療空間に、
やさしいファブリックの装いを。

Seat Color Variation

FSレザーは撥水性、防汚性に優れたファブリック調のビニールレザーです。

FS1 インディゴブラック	FS2 アッシュブラウン
FS3 キャンパスベージュ	FS4 パウダークレイ
FS5 サックスブルー	FS6 ソルティピンク