

LIGHT

5,000～34,000luxで無段階で調光でき、
高い演色性により自然な色を再現。

レジンモード搭載

タッチレススイッチによりライトの点灯、消灯、
レジンモードの切替ができます。



レジンモード



通常点灯時



FOOT CONTROLLER

踏み込み式フットコンローラー

シンプルな踏み込み式フットコントローラーです。ハンドピース
のチップブローや、注水の切替も行うことが可能です。



水切替バルブ

チップブロースイッチ

SPECIFICATIONS

● 標準 / ▲ オプション

ドクターユニット部	インストルメント	ホルダータイプ	●
		ハンドピース3本掛け(シリンジ含む)	●
		ハンドピース回路追加(5本まで)	▲
		BT14シリンジ	▲
		SYR-20シリンジ	●
		ライト付マイクロモーター(MCX)	●
		パリオス2スケーラー	▲
		281エアモーター	▲
		ライト付タービン2本以上仕様	▲
		着脱式ハンドピースホース	●
コントロール		踏み込み式フットコントローラー(水切替バルブ付)	●
		汚物入れホルダー	●
アクセサリー		シリコンマット	●
		ワンタッチガスバーナー(ボンベケース付)	▲

カレント部	スピットン	センサー式コップ給水(タイマー式)	●
		ボウル洗浄(単動・連動タイマー式)	●
		水クリーンフィルター	●
		水用サービスカブラー	▲
		エア用サービスカブラー	●
	アシスタント	セントラルバキューム(遅延付)	●
		セントラル式排唾	●
		BT14シリンジ	▲
		SYR-20シリンジ	●
		コップ給水温水器	●

チェアライト部	ESシート(14色)	●
	ラグジュアリーシート(8色)	▲
	ファブリックシート(6色)	▲
	2関節ヘッドレスト	●
	アームレスト左	●
	ジャンクションボックス(内蔵式)	●
	ストレートボール	●
	ステラライトヴィータ	●
	患者用ミラー	▲

販売名	一般的名称	認証・届出番号	クラス分類	特定保守	設置管理	製造販売元
ベルキュール	歯科用ユニット	224ACBZX00053000	管理	該当	該当	ベルmontテクノロジ株式会社
ベルポートNPチェア	歯科診査・治療用チェア	27B1X00042001045	一般	該当	該当	タカラベルmont株式会社
ステラライトヴィータ	汎用歯科用照明器	27B1X00042002049	一般	非該当	非該当	タカラベルmont株式会社
ベルmontタービン	歯科用ガス圧式ハンドピース	301ABBZX00047000	管理	該当	非該当	株式会社ナカニシ
エレクトリック	歯科用電気回転駆動装置	220AFBZX00212000	管理	該当	非該当	ビエン・エア・アジア株式会社
ベルmont-N	ストレート・ギアードアングルハンドピース	301ABBZX00048000	管理	該当	非該当	株式会社ナカニシ
パリオス 170	歯科用多目的超音波治療器	223ALBZX00036000	管理	該当	非該当	株式会社ナカニシ
SYR-20シリンジ	歯科用口腔洗浄器	13B2X00095000006	一般	非該当	非該当	ベルmontテクノロジ株式会社
BT14	歯科用口腔洗浄器	27B1X00042001036	一般	非該当	非該当	タカラベルmont株式会社

安全にお使いいただくために

◎ご購入前に、設置場所・使用条件・用途をご確認ください。
◎ご使用の前に添付文書、取扱説明書をよくお読みの上、
正しくお使いください。

・製品の仕様・デザイン・寸法は、予告なく変更される場合がありますのでご了承ください。
・写真はカラー印刷のため実物の色とは多少異なる場合があります。
・実際の製品にはご使用上の注意ラベルが貼付されています。

タカラベルmont株式会社 <https://www.takara-dental.jp>

【大阪本社】〒542-0083 大阪市中央区東心斎橋2-1-1 【東京本社】〒107-0052 東京都港区赤坂7-1-19

札幌 (011)863-2007	盛岡 (019)652-9744	仙台 (022)232-4480	郡山 (024)925-0742	新潟 (025)268-0333	さいたま (048)640-5900	千葉 (043)302-0267
東京 (03)3405-6877	横浜 (045)681-6241	名古屋 (052)932-6251	金沢 (076)221-8412	京都 (075)241-3425	大阪 (06)6212-3602	神戸 (078)231-6751
岡山 (086)233-8825	広島 (082)278-2411	高松 (087)862-3480	福岡 (092)411-2746	鹿児島 (099)226-9481	沖縄 (098)897-6656	

コンタクトセンター

TEL(0120)194-222【フリーダイヤル】

※コンタクトセンターはタカラベルmont株式会社が修理および点検を委託するベルmontコミュニケーションズ株式会社の受付窓口です。

製造販売元

株式会社ナカニシ 〒322-8666 栃木県鹿沼市下日向700
ビエン・エア・アジア株式会社 〒171-0014 東京都豊島区池袋2-40-12
ベルmontテクノロジ株式会社 〒136-0072 東京都江東区大島8-19-13
タカラベルmont株式会社 〒542-0083 大阪府大阪市中央区東心斎橋2-1-1

修理および点検受付窓口

TAKARA BELMONT

BELPORT NP

ベルポート NP



スムーズな診療の実現をサポートし、
患者さんの不安感をやわらげます。
シンプルでベーシックな歯科用ユニット。





CHAIR

曲線美を意識したなめらかな印象のチェア。
患者さんの不安を軽減し、リラックスできる環境をサポートします。



昇降ストローク

高さ800mmまで上昇する昇降ストロークを実現し、立位診療を含め幅広い診療ポジションに対応します。

2関節ヘッドレスト

患者さんの頭の位置にあわせて、マニュアルで自由に調整できます。子供や高齢者の患者さんの頭も、しっかりとホールドします。



快適性の追求

座面のステッチが患者さんの背ずれを抑え、適切な診療姿勢に導きます。

COLOR variation

シートカラー(ES) 14 colors

ES2イエロー	ES5ミントブルー	ES9アイボリー	ES10ライトブラウン	ES11ダークブラウン	ES12ブラウンレッド	ES13レッド
ES14キャメルレッド	ES16ライトブルー	ES17フロスグリーン	ES22マンダリンオレンジ	ES23アルドブルー	ES24スカーレットレッド	ES25インディゴブルー

シートカラー〈ラグジュアリー〉 8 colors option


SH1ブラック	SH6イエロー	SH7ダークブラウン	SH9ブルー
SH10キャメル	SH15アイボリー	SH18グリーン	SH22オレンジ

シートカラー〈ファブリック〉 6 colors option

FS1 インディゴブラック	FS2 アッシュブラウン	FS3 キャンバスベージュ
FS4 パウダーグレー	FS5 サックスブルー	FS6 ソルティピンク

DOCTOR TABLE

必要な機能に絞り込んだユーザビリティの高いシンプルなデザイン。

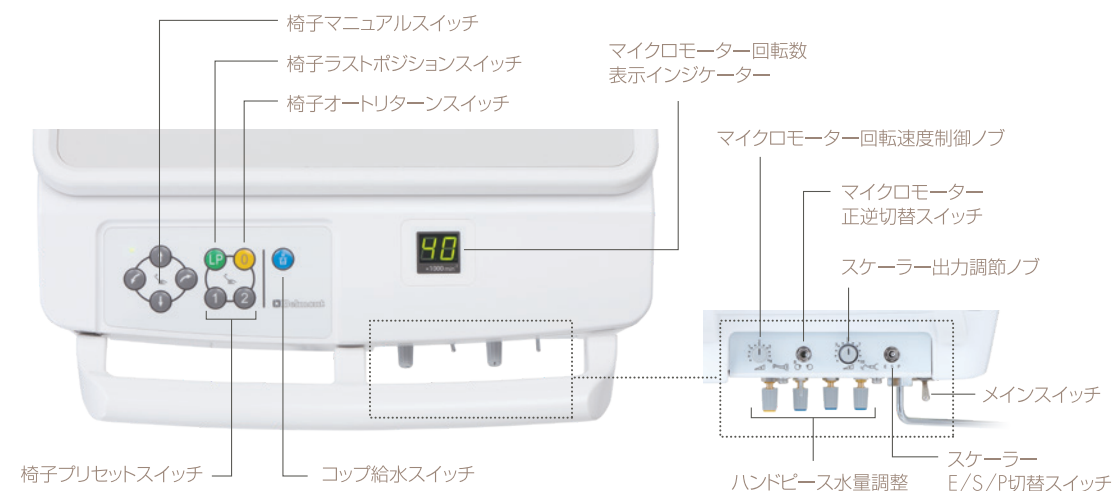

N-5シリーズ 391XタービンKaVo



- ・ヘッドサイズ:φ12.1×13.3mm
- ・チャック:プッシュボタン式
- ・パワー:26W
- ・回転速度:325,000~430,000min-1
- ・4点注水スプレー
- ・クリーンヘッドシステム

※KaVoとMultiFlexは、Kaltenbach & Voigt GmbH & Co. (Germany) の登録商品です。

MCXモーター光付



- セット
- ・DA-290X-IC
 - ・DA-290X-S

- ・本体質量:約76g
- ・最大トルク:2.5 N・cm
- ・回転数:1,000~40,000min-1

バリ奥斯2シリーズ option

バリ奥斯170Tiスケーラー光付 バリ奥斯170スケーラー



- ・周波数:28kHz~32kHz
- ・チップ3種 (G4, G8, G9) 標準付属

SYR-20シリンジ



- ・ノズル部オートクレープ滅菌可能 (135℃)

CUSPIDOR UNIT

清掃性が高いフラットデザインでながく清潔にご使用いただけます。

アシスタントホルダー

アシスタント・インスツルメントの
取り出し、収納ともしやすい
ホルダー形状を採用しました。



デンタルライト切替スイッチ

シリンジ水量調節ノブ

水用サービスカプラー水量調節ノブ option

センサー式コップ給水(タイマー式)

置かれた紙コップを感知するセンサー式の給水方法を
採用。さらに給水と連動して、ボウル洗浄も行います。

スピットンボウル

一体成型型でお手入れしやすい
デザインで清掃時の負担を軽減。
衛生面にも配慮しました。




ボウル洗浄スイッチ

コップ給水スイッチ

水クリーンフィルター option

多孔質中空糸膜を使用した、歯科用
精密ろ過膜フィルター。水回路内の
赤サビ、バクテリアを除去し、スケール
の付着を抑えます。

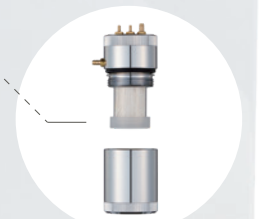

温水器スイッチ

シリンジエア量調節ノブ

エア用サービスカプラー option

水用サービスカプラー option