

Accessories [Bel Laser Plus／Se]

各種ハンドピースやチップの使いやすさも追求

PLUS

Bel Laser **+**

オリジナルチップ用

トップピース

コントラタイプ

ストレータイプ ※オプション(別売)

チップの脱着はフリクション式を採用しており、十分な保持力を持ちながら、ワンタッチでの交換が可能です。

Pチップ用

トップピースP

チップの脱着はネジ式になっています。

オリジナルチップ

セラミックチップ
φ1.0mm

13(短)

20(長)

細いテーパー形状および円筒状のチップ。ワンタッチでチップの脱着が可能。

Pチップ

テーパー

11P

12P

13P

針

2P

3P

テーパー形状および針状のチップ。

オリジナルチップ/Pチップ共用

ベルレーザープラス用ファイバー(ガイド光付)

2つのラインナップ(オリジナルチップ、Pチップ)に対応したハンドピースシステムを採用。照射部位に応じた視認性にこだわり、ミニチュアヘッドを採用しました。オリジナルチップもしくはPチップからお選びください

Bel Laser *Se*

オリジナルチップ用

トップピース

コントラタイプ

ストレータイプ ※オプション(別売)

チップの脱着はフリクション式を採用しており、十分な保持力を持ちながら、ワンタッチでの交換が可能です。

Pチップ用

トップピースP

チップの脱着はネジ式になっています。

オリジナルチップ

セラミックチップ
φ1.0mm

13(短)

20(長)

細いテーパー形状および円筒状のチップ。ワンタッチでチップの脱着が可能。

Pチップ

テーパー

11P

12P

13P

針

2P

3P

テーパー形状および針状のチップ。

ベルレーザーエス用ファイバー

延長ファイバー

ファイバーとハンドピースの接続部から先端部までCO₂レーザー光を導光します。

ベルレーザーエス用ファイバーP

仕 様	
一 般 的 名 称	炭酸ガスレーザー
販 売 名	ベルレーザー
医 療 機 器 承 認 番 号	21700BZZ00348000
ク ラ ス 分 類	クラスⅢ 高度管理医療機器、特定保守管理医療機器、設置管理医療機器
効 能 ・ 効 果	生体組織の切開、止血、凝固および蒸散 照射対象牙質表面の溶融による象牙細管閉塞
電 気 定 格	AC100V 50Hz/60Hz 400VA
電 撃 に 対 す る 保 護	クラスⅠ機器 装着部なし
外 形 寸 法	W335×D437×H928mm (ファイバー部除く)
質 量	28kg
導 光 路	中空ファイバー
レ ー ザ ー 照 射 出 力 可 変 範 囲	0.5W～15W※
照 射 設 定	WAVE 連続/シングル/リピート
	PULSE ノーマル/パルス/スーパースパルス/ベルモントパルス/ハードティッシュパルス
ガイド光(ベルレーザープラスのみ)	5mW以下(チップ先端)
冷 却 方 式	自然空冷
レ ー ザ ー 出 射 口 から 出 る ガ ス の 種 類 と 流 量	種類：空気 流量：1.8L/min±20%(最大)

※0.5W～2.0Wは0.1W刻み、2.0W～10Wは0.5W刻み、10W～15Wは1W刻みで設定可能

タカラベルモント株式会社 <https://www.takara-dental.jp>

【大阪本社】〒542-0083 大阪市中央区東心斎橋2-1-1

【東京本社】〒107-0052 東京都港区赤坂7-1-19

札幌 (011)863-2007	盛岡 (019)652-9744	仙台 (022)232-4480	郡山 (024)925-0742	新潟 (025)268-0333	さいたま (048)640-5900	千葉 (043)302-0267
東京 (03)3405-6877	横浜 (045)681-6241	名古屋 (052)932-6251	金沢 (076)221-8412	京都 (075)241-3425	大阪 (06)6212-3602	神戸 (078)231-6751
岡山 (086)233-8825	広島 (082)278-2411	高松 (087)862-3480	福岡 (092)411-2746	鹿児島 (099)226-9481	沖縄 (098)897-6656	

修理および点検受付窓口

コンタクトセンター
TEL(0120)194-222【フリーダイヤル】 FAX(072)344-7985



安全にお使いいただくために

○ご購入前に、設置場所・使用条件・用途をご確認ください。

○ご使用の前に添付文書、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

製造販売元 **タカラメディカル株式会社** 兵庫県尼崎市額田町5-15

●製品の仕様・デザイン・寸法は、予告なく変更される場合がありますのでご了承ください。 ●写真はカラー印刷のため実物の色とは多少異なる場合があります。 ●製品の寸法、質量、動作範囲の表示には、若干の誤差を含んでいます。 ●このカタログは2026年8月現在のものです。

YY-DM-242 260805B MI

**TAKARA
BELMONT**

シンプルなオペレーションで
診療に活きるスタンダードモデル

CO₂ レーザー
Bel Laser *Se*
ベルレーザー エスイー

CO₂ レーザー
Bel Laser **+**
ベルレーザー プラス

タッチパネルでシンプル操作、
使いやすさを追求したガイド光モデル



2025年10月
硬組織薬事認可取得

照射象牙質表面の
溶融による象牙細管閉塞
(刺激の遮断、術後過敏発現防止)

Bel laser's Features


MODE

■ Full mode

リピートパルスのon time/off timeを設定できるモード。

■ Simple mode P


アイコン形式で処置モードの選択が可能。処置名をタッチするだけのシンプルで使いやすいモード。

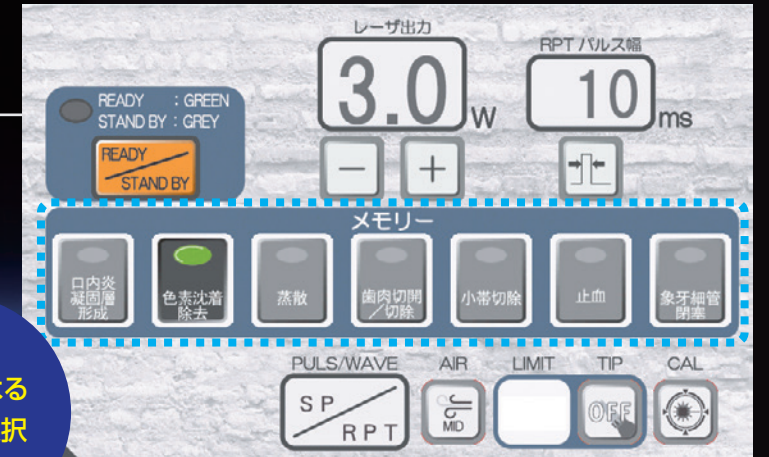

処置名によるメモリー選択

■ フレキシブルにとりまわせるファイバー

術者の動きに応じて追従する柔軟なファイバーを採用しました。

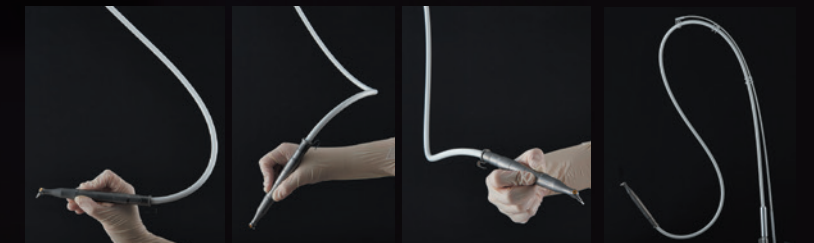


■ 照射位置を確認できるガイド光

視認性の高い緑色のガイド光を採用
(チップ先端で出力5mW以下・3段階調光)

※ベルレーザープラスだけの機能です。



処置名によるシート名とメモリー名を設定可能

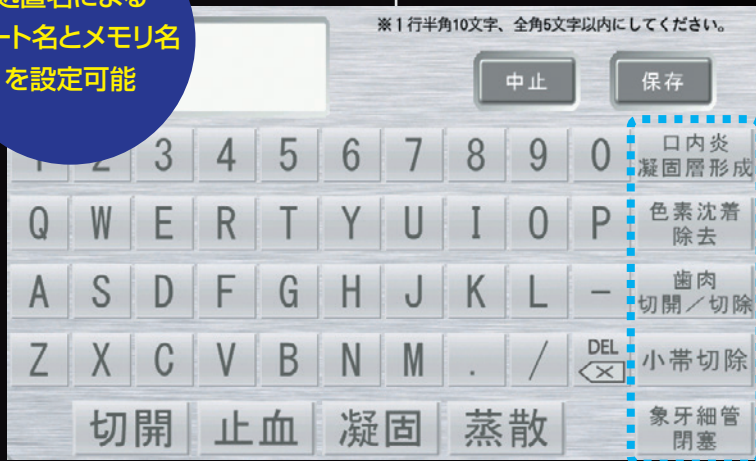

メモリおよびシートに処置名を表示できるようになり、操作性と視認性がさらに向上しました。



SDカードスロット
出力設定内容の書き込み、読み込みが可能です。



■ ツールバーから使いたい機能をすぐに選択できる

SUPPORT


操作画面説明やお手入れ方法などを表示



※表示例

FOOT SW

フットスイッチによる出力制御を選択

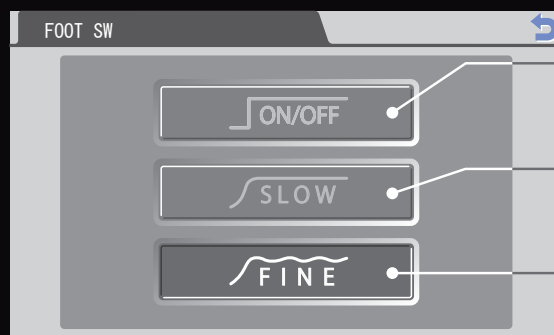

ON/OFF
フットスイッチを踏むと直ちに設定出力を照射

SLOW
フットスイッチを踏むと1秒後に設定出力に到達


FINE
フットスイッチの踏み加減で出力調節が可能

ファインフットコントローラー採用

フットスイッチの踏み加減で出力調整が可能。
ハンドピースのようにレーザーの出力加減を使用していただけです。

■ キャリブレーション

出力の安定性を守るキャリブレーション機能

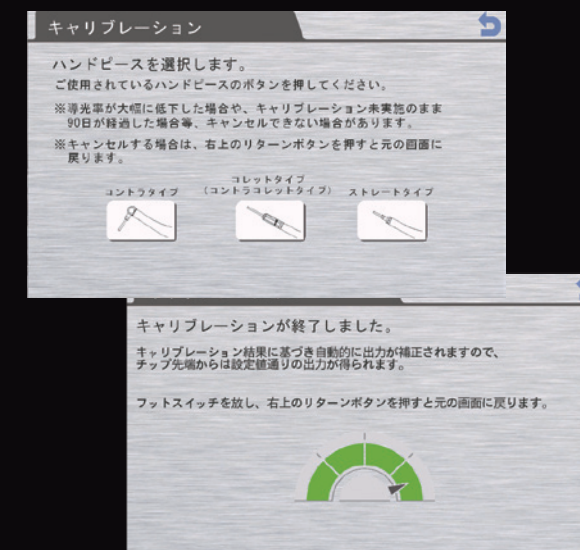

ガイド光非搭載のスタンダードモデル Bel Laser Se

レーザーの出力操作性はガイド光搭載のモデルのプラスと同一です。

